

取扱説明書


入浴グリップ

■入浴グリップ N-130

品番 VAL12001

■入浴グリップ N-200

品番 VAL12002

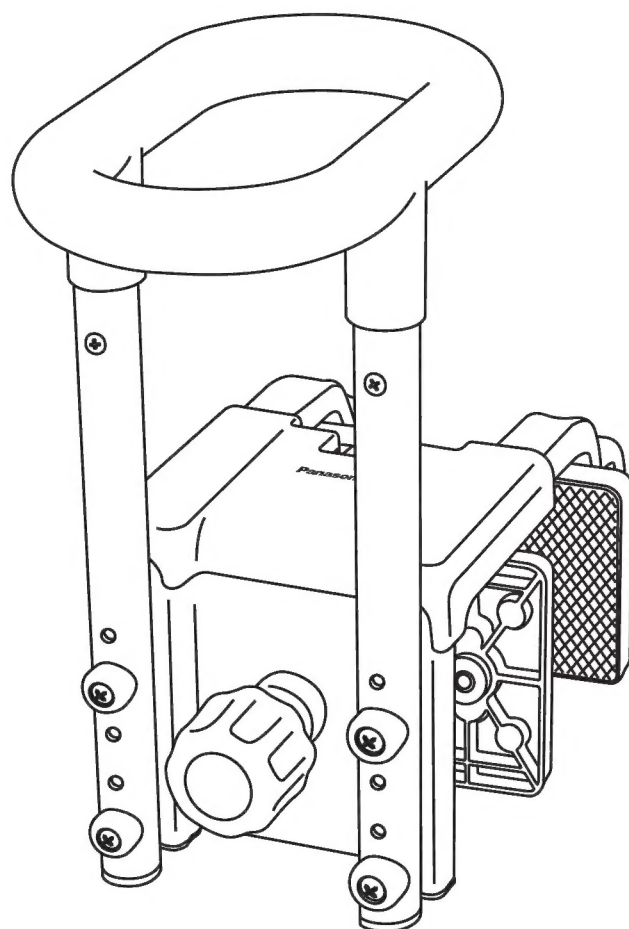

ご使用になる前に必ずお読みください。

最大使用者体重:100kg以下

- 安全上のご注意P2・3
- 各部の名称、部材、付属品一覧、寸法図P4
- ご使用になる前にP5
- 設置方法、使用方法P6・7

- お手入れ方法、
ノブが空回りした時の解除方法、仕様P8
- 保証とアフターサービスP9
- お客様ご相談窓口のご案内P10
- 保証書P11・12

このたびは、入浴グリップをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」(P2・P3)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

■ 安全上のご注意 ■

必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です）



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告



必ず守る

■本品を取り付ける前に、浴槽の取り付け面に湯あか等の汚れや、水分および洗剤等が付着していないことを確認する。
浴槽が汚れていると、使用中に本品がはずれ、転倒するおそれがあります。



必ず守る

■取り付け、取りはずしの場合は、落とさないよう取り扱いには十分注意する。
本体が破損したり、けがをするおそれがあります。



必ず守る

■浴槽壁をまたいで出入りする場合は、ハンドル部をにぎる。
出入りする場合にノブ部、グリップ部をにぎると、本品が浴槽からはずれ、転倒やケガの原因となります。



必ず守る

■浴槽内で姿勢を安定させる場合は、グリップ部をにぎる。
立ち上がり時にグリップ部をにぎると、本品が浴槽からはずれ、転倒やケガの原因となります。



分解禁止

■改造や分解をしない。
本品が正常にはたらかず、けがの原因となります。



禁止

■N-130タイプは浴槽壁の厚みが4.5cm未満、または13cmを超え、傾斜が8°を超える場合は取り付けない。
浴槽からはずれ、転倒やけがの原因となったり、浴槽が破損することがあります。



禁止

■N-200タイプは浴槽壁の厚みが12cm未満、あるいは20cmを超え、傾斜が8°を超える場合は取り付けない。
浴槽からはずれ、転倒やけがの原因となったり、浴槽が破損することがあります。



禁止


■取り付けの際、浴槽壁厚みの差が5.0cmを超える場所には取り付けない。
本品が浴槽からはずれ、転倒やけがの原因となります。



禁止

■他の用途で使わない。
けがの原因となります。

浴槽への取り付け幅20cm

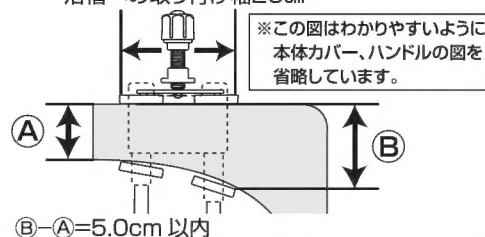


警告



必ず守る

■ノブが洗い場側に向くように取り付ける。

取り付け方向が逆になると、しっかり固定できず、転倒やけがをするおそれがあります。

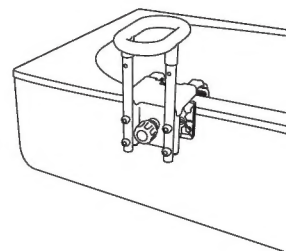

必ず守る

■浴槽壁の外側に段がついている場合は、必ず付属の「厚み調整板」を使用する。


浴槽からはずれ、本体が破損したり、けがをするおそれがあります。



必ず守る

■毎回ご使用の前に、ハンドルを前後左右に揺らしてみ、浴槽にしっかり固定されているか必ず確認する。

しっかり固定されていないと、使用中に本品がはずれ、転倒するおそれがあります。

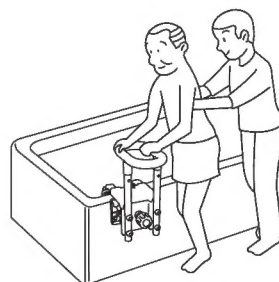

必ず守る

■使用者が自分の身体を十分に安定させられない場合は、介助者が付き添う。

守らないと転倒やけがをするおそれがあります。

注意



必ず守る

■各部のねじがゆるんでいないか時々点検する。

本体が正常にはたらかず、破損またはけがをするおそれがあります。



必ず守る

■追い焚き付き給湯器や直焚き浴槽、お湯が循環している浴槽(24時間風呂)で使用する場合は、入浴時のみ設置し、使用後は浴槽から取り出すこと。

プラスチックが変形又は破損し、転倒やけがの原因となります。



禁止

■屋外に放置したり、直射日光に当てたりしない。

色あせやひび割れの原因となります。



禁止

■火気に近づけない。

火災や変形の原因となります。



禁止

■本品のハンドル部を持って、前後左右に強く押したり引いたり乱暴に扱わない。

浴槽が破損することがあります。



禁止

■石けんや洗剤が付着した手で使用しない。

手が滑って、転倒やけがの原因となります。



禁止

■45℃以上の湯温で使用しない。



ゴムシートがはがれ、転倒やけがの原因となります。




禁止

■塩分や硫黄を含む入浴剤等を使用しない。


錆の原因となります。

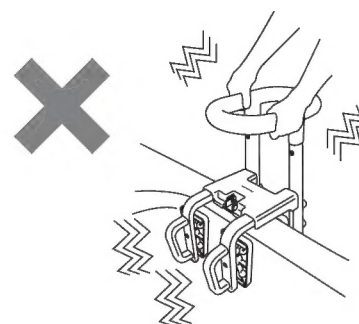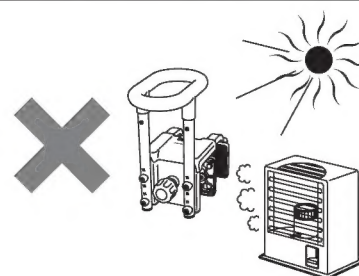

■ 各部の名称、部材、付属品一覧 ■

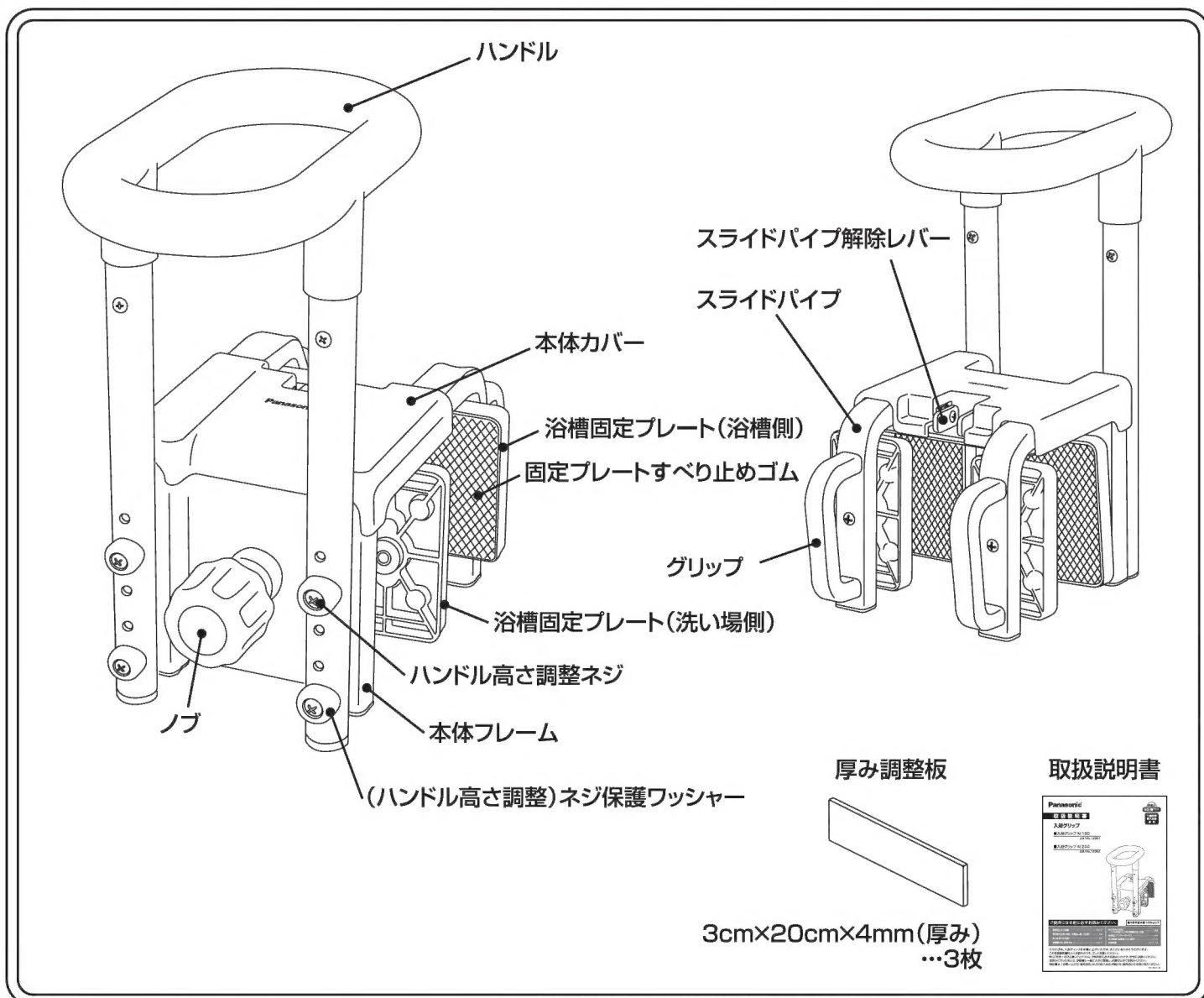

■ 寸法図(cm) ■

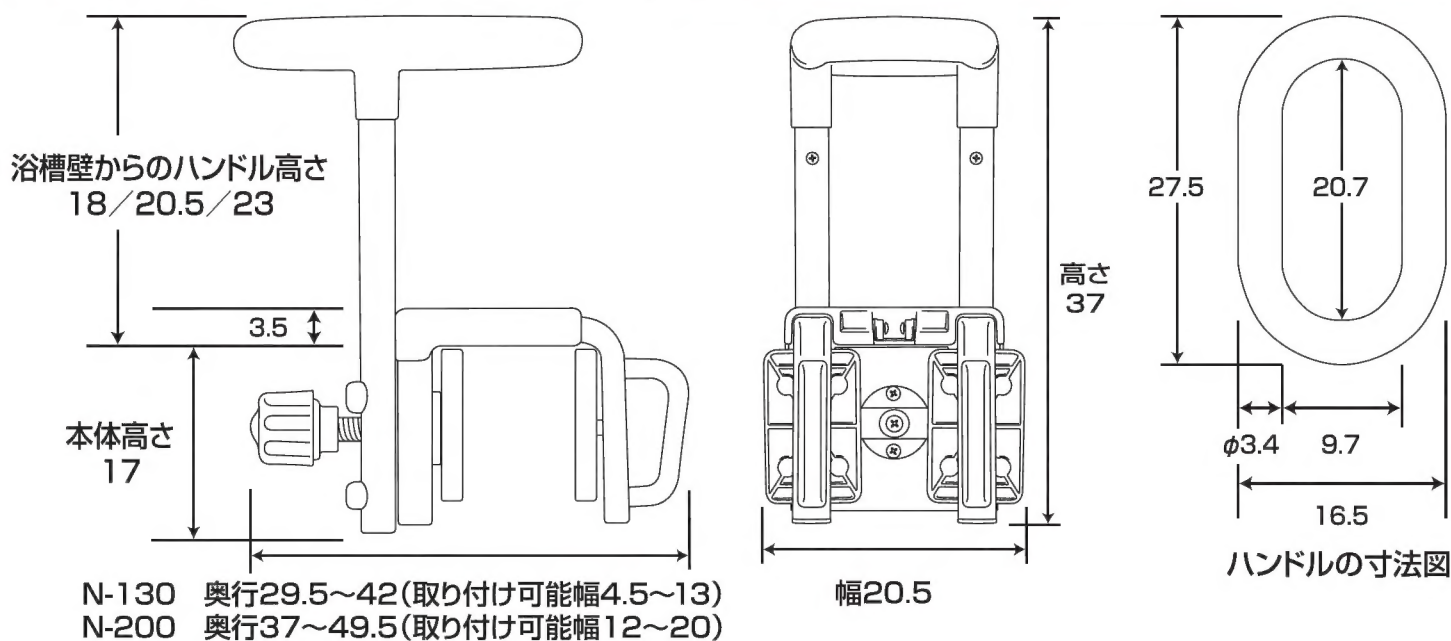

■ ご使用になる前に (取り付ける前に) ■


1 浴槽壁の厚みを測ってください。

入浴グリップ N-130

浴槽壁の厚みが4.5cm～13cmで、傾斜が8°以下の浴槽に取り付けられます。

入浴グリップ N-200

浴槽壁の厚みが12cm～20cmで、傾斜が8°以下の浴槽に取り付けられます。

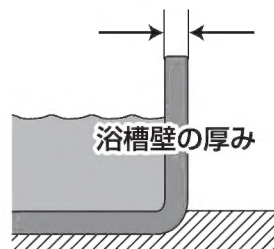

2 浴槽壁に段差がないか調べてください。

段差がある場合は**3**にすすみ、調整をしてください。

3 浴槽の段差調整

●浴槽の外面の段差が12mm以下の場合は、付属の厚み調整板にて、段差を調整してください。(段差がなければ、この調整は不要です)

浴槽壁の形状	高さによる区分	厚み調整板による調整方法
	7.5cm以上	○ 特に調整の必要はありません。
	4.5～7.5cm	厚み調整板の剥離紙をはがして、段差をなくすのに必要な枚数を重ね、浴槽壁の段差部分にお貼りください。
	4.5cm未満	✕ 安全性に問題がありますので、使用しないでください。
	4.5cm未満	○ 浴槽の外壁がタイル面でしっかりしていれば、調整の必要はありません。外壁がその他の場合は、使用しないでください。
	4.5～7.5cm	厚み調整板の剥離紙をはがして、段差をなくすのに必要な枚数を重ね、浴槽壁の段差部分にお貼りください。
	7.5cm以上	✕ 安全性に問題がありますので、使用しないでください。


※厚み調整板の枚数の選定は、浴槽の取り付け予定位置にて仮当てを行い、必要な枚数をあらかじめお調べください。

●浴槽の外面の段差が13mm以上の場合には、段差に合わせた厚みの木板など、しっかりしたものを当てて取り付けしてください。

そのまま使用されると、本体フレームが破損するなどして、けがをするおそれがあります。


ご注意

ポリ浴槽などで、浴槽外側のエプロン部が取りはずし可能な場合は、取り付けできません。

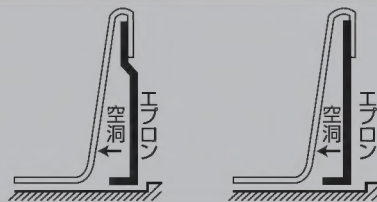


浴槽内外の壁が一体であるが、外壁の強度が弱く正しく取り付けできない場合

壁の補強として、高さに合わせた長さの木板を、浴槽壁の洗い場側に取り付けてください。

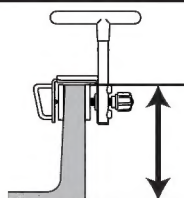

この間の長さにあわせた木板をご用意ください。

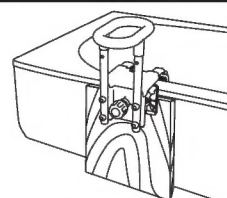


■ 設置方法 ■

1 ハンドルの高さの調整


- ① ハンドルの高さは、高さ23.0cmの位置にセットされていますが、使いやすい高さに合わせて2.5cm間隔、3段階の調整ができます。

このままで良ければ、次の②と③をとばして


② 浴槽への取り付けに進んでください。

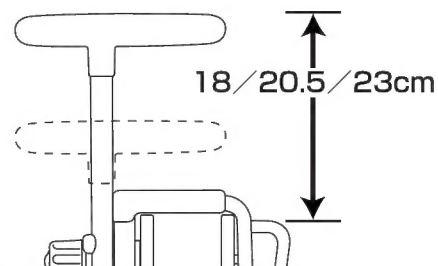

- ② ハンドル高さ調整ネジをプラスドライバーではずしてください。

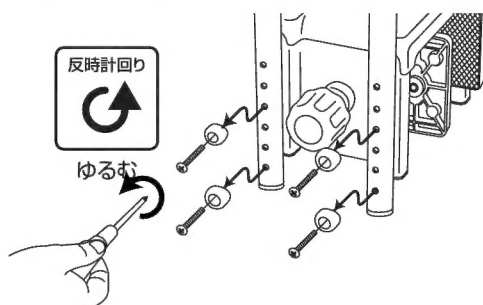

- ③ ハンドルの高さを調整し、再度締め付けてください。

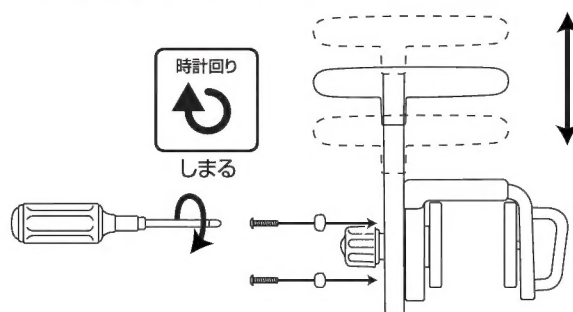


2 浴槽への取り付け



浴槽壁の厚みを測ってください。

取り付け厚み幅はN-130タイプは4.5～13cm、N-200タイプは12～20cmです。壁面がもっとも厚いところ③と薄いところ①を測ってください。

①と③ともに、取り付け厚み幅の範囲内であること、③-①が5cm以内であることを2点を確認してください。

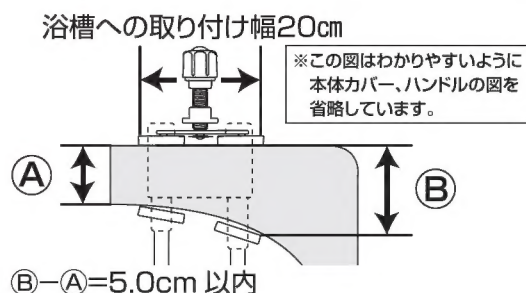



- ① 浴槽壁に乗せる前にまず、ノブをゆるめ、浴槽固定プレート(洗い場側)を洗い場側に移動させてください。

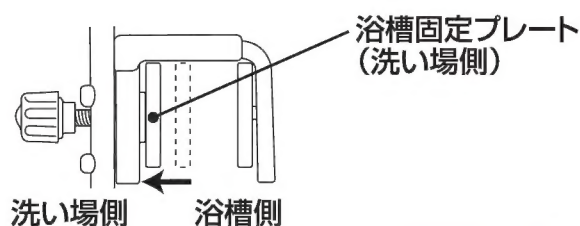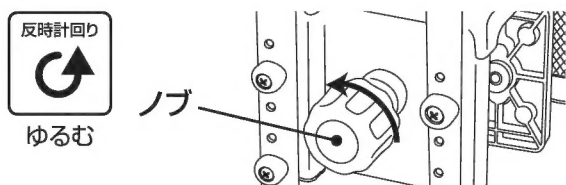


ご注意

- つよい力でノブを手前にゆるめ過ぎると、ノブが空回りする場合があります。
- ノブが、空回りして調整できなくなった場合は、P8「ノブが空回りした時の解除方法」をご覧ください、空回りを解除してください。

- ② スライドパイプ解除レバーを引きながら、スライドパイプを浴槽側へ引き出してください。

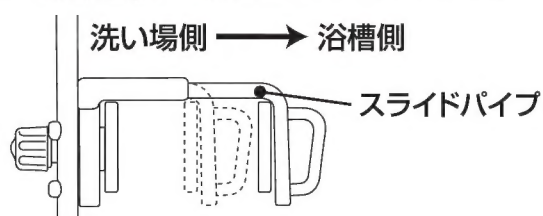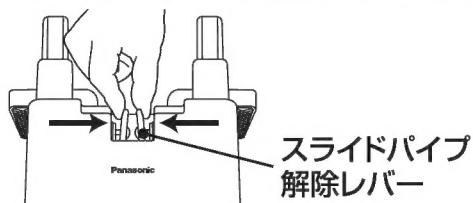

- ③ 浴槽壁に製品をのせ、
スライドパイプを移動(押して)して、
浴槽壁の浴槽側に浴槽固定プレート(浴槽側)を
あててください。

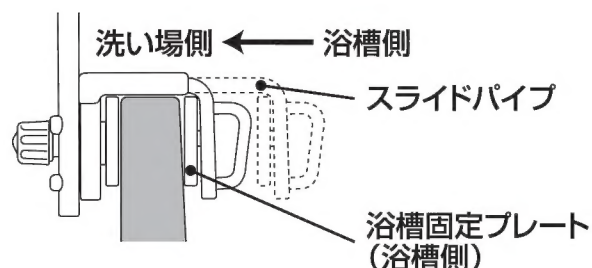

3 ノブを締める

- ① ノブを時計回りに締めてください。
カチカチと音が鳴ると、十分な締め付けとなり、
本体が浴槽に固定されます。
- ② 浴槽固定プレートが浴槽壁にあたっている事を
確認してください。





4 ぐらつき、ゆるみの確認

ハンドルを持って前後左右に軽く揺らし、がたつき、ずれが無いことを確認してください。


■ 使用方法 ■

使用前には必ず、浴槽にしっかりと固定されていることを確認してからご使用ください。
*ご使用前には一度、健常者の方が、使い勝手のチェックをすることをおすすめいたします。


- 毎回ご使用の前に、スライドパイプ解除レバー部に隙間が発生していないか、確認してください。
- 隙間がある場合は、ノブをゆるめて本体を取り外し、もう一度浴槽へ取り付けてください。

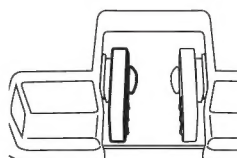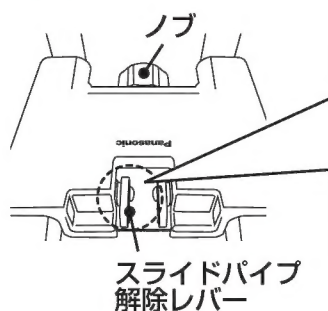

○ 正常な状態

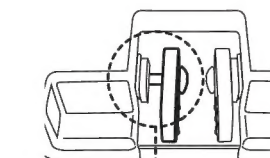

✕ レバーが浮いている

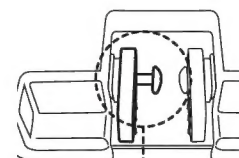

✕ ネジが浮いている


ハンドルの使い方

- 浴槽への出入り
ハンドルをつかみながら
浴槽壁を片足ずつ
ゆっくりとまたぎます。



グリップの使い方

- 入浴中の姿勢保持
入浴中にグリップをつかみ
身体の安定を保ちます。

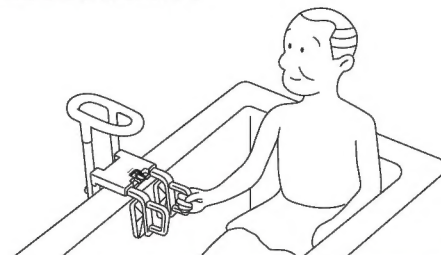

警告

■ シャンプーや石鹸がついている場合は、洗い流してから使用する。

滑って転倒するおそれがあります。

■ グリップを激しくゆすったりしない。

ハンドルやフレームが動き、不安定になり浴槽が破損したり、転倒やけがをすることがあります。

■ お手入れ方法 ■


中性洗剤をうすめた液をスポンジかやわらかい布にふくませて汚れを取り
きれいな水で洗剤を洗い流して、かげ干しか、乾いた布で空拭きしてください。

ご注意

- たわしや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等のご使用は避けてください。
傷がつき、汚れが落ちにくくなります。
- 必ず中性洗剤をご使用ください。
アルカリ性洗剤、酸性洗剤、塩素系洗剤、シンナー、
クレゾール等は絶対に使用しないでください。
プラスチックが劣化または破損し、けがの原因となることがあります。

■ ノブが空回りした時の解除方法 ■

浴槽固定プレート(洗い場側)が本体フレームにあたるまで「ノブ」をゆるめ過ぎると
「ノブ」が空回りして、浴槽固定プレートが移動できなくなる場合があります。
その場合は下記①②の方法で空回りを解除してください。

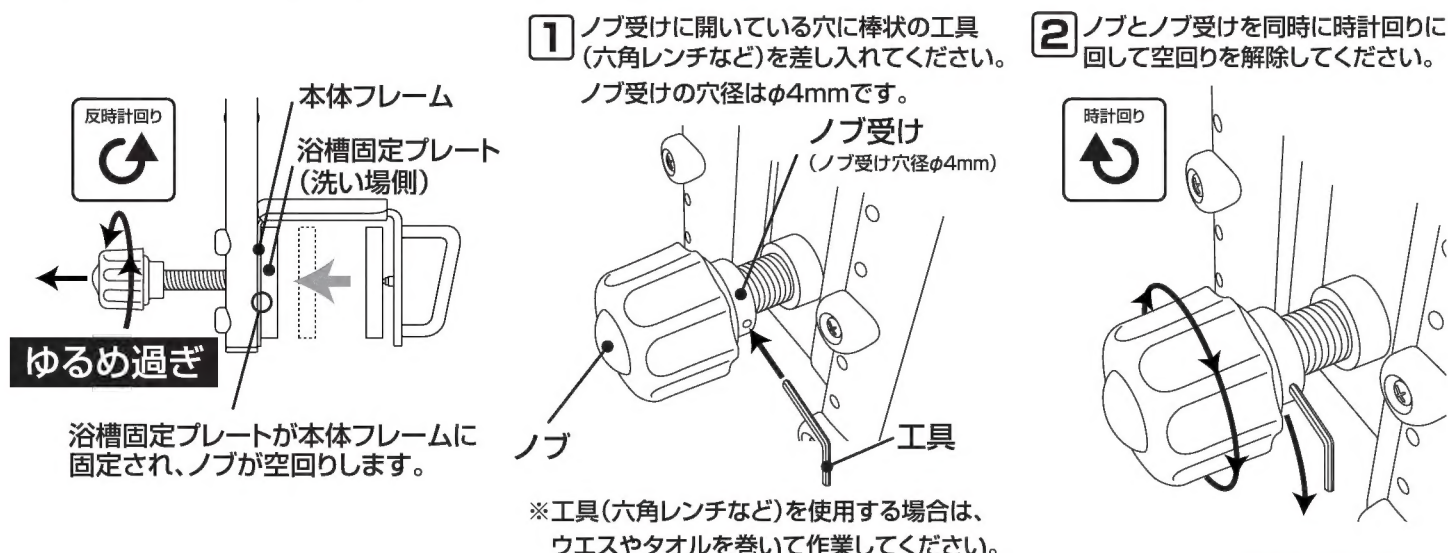

■ 仕様 ■

製 品 名	入浴グリップ N-130		入浴グリップ N-200	
製 品 品 番	VAL12001	VAL12001A	VAL12002	VAL12002A
色 調	オレンジ	ブルー	オレンジ	ブルー
サイズ (cm)	幅 20.5 × 奥行 29.5~42 × 高さ 37		幅 20.5 × 奥行 37~49.5 × 高さ 37	
製 品 重 量	3.3kg		3.4kg	
材 質	本体フレーム、スライドパイプ：アルミニウム 固定プレート、スライドパイプ解除レバー、グリップ：ポリプロピレン 本体カバー：ABS樹脂 ハンドル(構造部材)：アルミニウム ハンドル(被覆部)、固定プレートすべり止めゴム：オレフィン系エラストマー ノブ：ポリアセタール樹脂 厚み調整板：エチレンプロピレンゴム			

■ 保証とアフターサービス ■

●保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店名、購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間はご購入日より1年間です。

ただし、一般家庭用以外に使用された場合は保証期間内でも有料修理とさせていただきます。

●補修用性能部品の保有期間

当社は入浴グリップの補修用性能部品を製造打切り後、5年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

●修理を依頼されるとき

●保証期間中は

ご購入の販売店まで、品名、品番、ご購入日、故障の状況(できるだけ具体的に)、ご住所、お名前、お電話番号をご連絡ください。

保証の規定に従って修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

ご購入の販売店にご相談ください。


修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

公的介護保険制度購入対象商品

※申請の際にコピー、または切り取ってご使用ください。

入浴グリップ N-130


品番:
VAL12001(オレンジ)
VAL12001A(ブルー)

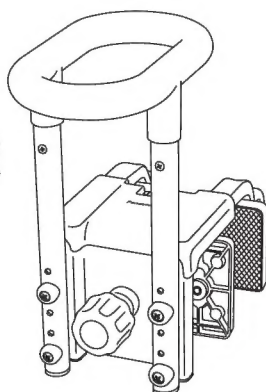

パナソニック
エイジフリーライフテック
株式会社

入浴グリップ N-200

品番:
VAL12002(オレンジ)
VAL12002A(ブルー)

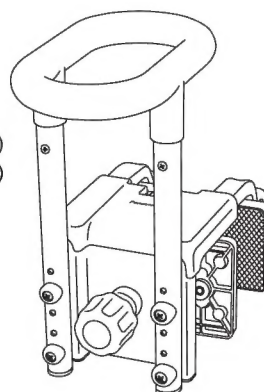

パナソニック
エイジフリーライフテック
株式会社

お客様ご相談窓口のご案内

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、
まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

商品・お取扱いなどのご相談は

パナソニック エイジフリーライフテック株式会社

フリーダイヤル



0120-365887

●受付時間 9:00～17:30(土、日、祝日休み)

<http://panasonic.co.jp/hc/phcalt/>

西日本営業所 TEL.06(6908)8141 FAX.06(6908)4506

東日本営業所 TEL.03(6218)1235 FAX.03(6218)1236

パナソニック エイジフリーライフテック株式会社

本社 〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048 代表 TEL06(6908)8122